

Documentation utilisation disques 20 cm Spirale & 12 spirales

Contexte

Les travaux de D'Arsonval et de Rife ont permis de mettre en avant qu'un stress généré par des champs magnétiques impose une réaction du corps ou des pathogènes.

D'Arsonval utilisait des fréquences très élevées qui chauffait les cellules du corps. Ce phénomène se nomme la diathermie ou thermo-pénétration. Lorsque les fréquences sont bien adaptées, les tissus ne s'échauffent pas.

Les réponses du corps peuvent être

- Une destruction de pathogènes,
- Un gain d'énergie,
- Une normalisation du système endocrinien dont la thyroïde.

Références :

- <https://www.endocrino-psychologie.org/endocrinologie-sportive>
- <https://www.adarsonval.fr/heritage3.html>
- https://www.persee.fr/doc/bupsy_0007-4403_1966_num_19_248_7671

Matériel

Pour fabriquer le signal (fréquences, forme d'onde, puissance électrique, etc.), il faut un générateur de fréquences et des bobines pour transmettre ces signaux électriques sous forme magnétique.

Le générateur GX de Spooky2 (<https://www.spooky2.fr/product/spooky2-generatorx/>) permet de fabriquer les signaux (fréquence, puissance, forme d'onde, séquençement, etc.) adaptés aux spécificités nécessaires (le générateur XM à des limites physiques ne permettant pas de faire aussi bien).

Pour fabriquer un champ magnétique enveloppant, il faut disposer de 2 disques (bobines) comme celui présenté ici : <https://www.etsy.com/fr/listing/1087546085/disque-spirale-20cm-12-spirales-bobine> ou bien <https://eolix.fr/produit/disque-20-cm-spirale-12-spirales-avec-cable-pour-spooky2/>



Logiciel

Le logiciel à installer et le guide de l'utilisateur en Français sont gratuits et téléchargeables sur <https://www.spooky2.fr/downloadspage/>.

La solution Spooky2 (matériel + logiciel) est une machine de Rife complète, très riche. L'utilisation du logiciel nécessite de passer un peu de temps pour en appréhender le fonctionnement.


Utilisation

Suivant les objectifs ciblés (énergie, pathologie, thyroïde, etc.), la manière d'utiliser le logiciel ne sera pas la même. Rapprochez-vous des référents Français de Spooky2 (mail spooky2france@gmail.com, groupe d'échanges <https://www.facebook.com/groups/Spooky2Francais>) pour plus de détails

Chaque bobine est composée d'une spirale d'Archimède, tournant dans le sens anti horaire (lévogyre). Au dos du disque se trouve 12 spirales à nombre d'or.

Les 2 disques sont à orienter dans le même sens, comme s'ils étaient empilés (par analogie pour des aimants, les faces opposées "se touchent").

Pour cibler les organes de digestions, l'un des disques est placé sur le ventre, centré sur le nombril, l'autre est placée dans le creux du dos, afin que l'ensemble soit de part et d'autre des tissus mous du corps.

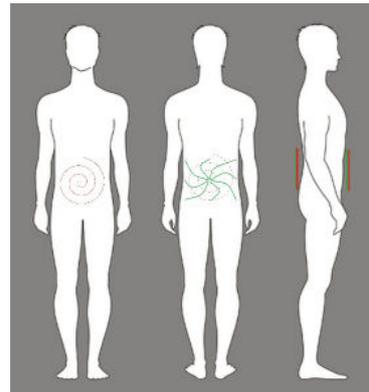

L'orientation des disques n'est pas importante. La spirale peut être orientée vers le ventre ou vers l'extérieur, cela n'a pas d'importance, du moment que les 2 disques sont orientés dans le même sens. Ainsi positionnés, le champ magnétique créé sera très enveloppant

Pour cibler une autre région du corps, placez-la en sandwich en respectant les orientations des disques.

Les vêtements peuvent être gardés mais il faut veiller à enlever les métaux (piercings, ceinture) ou les tenir éloignés (braguette).

Branchez les câbles aux sorties OUT1 et OUT2 d'un des générateurs G1 ou G2 du boîtier GX. et mettez en place le soin suivant vos attentes.